


KELIS
MEDICAL


APO
TECNIA



SONDES

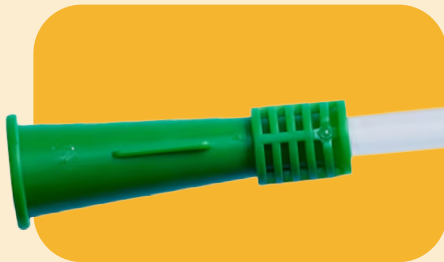

POCHES

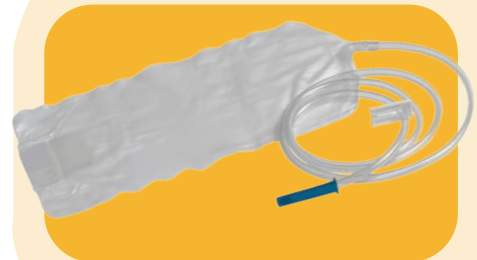

**SOINS
RECTAUX**

CATALOGUE **UROLOGIE**

ÉDITION 2026

KELIS & VOUS

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES SOINS RESPIRATOIRES

Avec Kelis Medical · Apotecnia, accédez à une offre complète et compétitive de dispositifs médicaux à usage unique, dédiée à la prise en charge des soins urinaires en établissement de santé comme en environnement médico-social. Nos solutions sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels de santé, tout en garantissant sécurité, fiabilité et confort du patient.

UNE GAMME LARGE ET STRUCTURÉE

Notre catalogue couvre l'ensemble des besoins liés aux soins urinaires, de la pose au maintien du drainage, en système ouvert ou clos :

- **Sondage urinaire intermittent** : sondes masculines et féminines
- **Sondage à demeure** : sondes de Foley 2 et 3 voies
- **Systèmes préconnectés** : solutions prêtes à l'emploi pour limiter les manipulations et réduire le risque infectieux
- **Poches urinaires** : Poches de lit, de récupération et systèmes clos
- **Accessoires et consommables** : bouchons, tubulures, crochets...

UNE DOUBLE EXPERTISE

Grâce à notre entité Innoset nous proposons également des sets de soins que nous assemblons et stérilisons, prêts à l'emploi ou sur mesure selon vos besoins.

Cette synergie nous permet de vous accompagner sur tous les fronts et de vous garantir la continuité et fiabilité des soins.



**UNE ÉQUIPE
TERRAIN**



**EXPÉDITION
RAPIDE**



**ENGAGEMENTS
RSE**



FLÉXIBILITÉ

SOMMAIRE

SONDES URINAIRES

Sonde intermittente	04
Sonde de foley NELATON (latex siliconé)	04
Sonde de foley NELATON (silicone)	04
Sonde de foley TIEMANN (silicone)	04
Sonde de foley DUFOUR (silicone)	04

SONDES PRÉCONNECTÉS

Sonde de foley Préconnectée (latex siliconé)	05
Sonde de foley Préconnectée (silicone)	05
Sonde de foley Préconnectée (silicone)	05

POCHES URINAIRES À SYSTÈME CLOS

Poche urinaire avec système Clos (SM4L)	06
Poche urinaire avec système Clos (SM7)	06
Poche urinaire avec système Clos (SM4000C)	06
Poche urinaire avec système Clos (SM5000C).....	06

RECUEIL ET ÉVACUATION DES URINES

Poche de vidange sans robinet	07
Poche de vidange avec robinet	07
Poche de vidange additonnelle	07
Poche de vidange C3 avec gélifiant SAP	07

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Gélifiant SAP	08
Fosset pour sonde	08
Crochet pour poche urinaire	08
Tubulure d'irrigation urologique	08

SOINS RECTAUX

Sonde rectale	09
Kit de lavement flexible	09

SETS DE SOINS

Set de sondage urinaire	10
Set de sondage urinaire à demeure	10

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les sondes urinaires	11
Les poches urinaires	13
Lexique	15



SUR COMMANDE : Cet icône indique que la référence n'est pas disponible en stock physique.

Le produit est proposé uniquement sur commande, et les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité fabricant ou fournisseur.

Sonde intermittente

PENNINE

Sonde urinaire intermittente non lubrifiée, conçue pour le drainage vésical ponctuel dans tout type d'environnement de soins. Dotée d'une pointe douce et arrondie pour une insertion atraumatique et de deux orifices latéraux assurant un drainage efficace.



Modèle Féminin

- Longueur plus courte : 18 à 23 cm selon la version.
- Conçue pour un trajet urétral plus court, facilitant la manipulation.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
FC-1406/1	CH 06 23 cm	100
FC-1408/1	CH 08 23 cm	100
FC-1410/1	CH 10 23 cm	100
FC-1412/1	CH 12 23 cm	100
FC-1414/1	CH 14 23 cm	100
FC-1416/1	CH 16 23 cm	100
FC-1418/1	CH 18 23 cm	100

Modèle Masculin

- Longueur standard 38 cm, adaptée à l'anatomie masculine

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NC-1208/SW/1	CH 08 38 cm	100
NC-1210/SW/1	CH 10 38 cm	100
NC-1212/SW/1	CH 12 38 cm	100
NC-1214/SW/1	CH 14 38 cm	100
NC-1216/SW/1	CH 16 38 cm	100
NC-1218/SW/1	CH 18 38 cm	100

Sonde de foley NELATON (latex siliconé)

SECURMED

Sonde urinaire pour adulte en latex siliconé, conçue pour un sondage permanent grâce à sa grande tolérance et son inertie chimique. Dotée d'une extrémité arrondie pour une insertion facilitée et équipée de œillets polis optimisant le drainage. Son ballonnet résistant (5/10 ml) assure un maintien sûr.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11601322121	CH 12 41 cm	10
11601322141	CH 14 41 cm	10
11601322161	CH 16 41 cm	10
11601322181	CH 18 41 cm	10
11601322201	CH 20 41 cm	10

Sonde de foley NELATON (silicone)

SECURMED

Sonde urinaire pour adulte en 100% silicone, conçue pour un sondage permanent grâce à sa composition totalement hypoallergénique. Dotée d'une extrémité arrondie pour une insertion facilitée et équipée de œillets polis optimisant le drainage. Son ballonnet résistant (5/10 ml) assure un maintien sûr.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11501322121	2 voies CH 12 41 cm	10
11501322141	2 voies CH 14 41 cm	10
11501322161	2 voies CH 16 41 cm	10
11501322181	2 voies CH 18 41 cm	10
11501322201	2 voies CH 20 41 cm	10
11501322221	2 voies CH 22 38 cm	10

Sonde de foley TIEMANN (silicone)

SECURMED

Conçue pour un drainage urinaire confortable et atraumatique. Son embout Tiemann biseauté facilite l'insertion chez les patients présentant une obstruction ou une sensibilité prostatique. Dotée d'un ballonnet 5-10 ml, de larges œillets polis pour un drainage optimal, et d'une ligne radio-opaque permettant le contrôle de la position.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11501332141	2 voies CH 14 41 cm	10
11501332161	2 voies CH 16 41 cm	10
11501332181	2 voies CH 18 41 cm	10
11501332201	2 voies CH 20 41 cm	10
11501332221	2 voies CH 22 41 cm	10

Sonde de foley DUFOUR (silicone)

SECURMED

Conçue pour l'irrigation vésicale continue et le drainage pour les patients nécessitant une prise en charge urologique spécifique.

100% silicone : limite les risques d'incrustations, permettant une utilisation prolongée jusqu'à 30 jours. Embout Dufour, rigide et biseauté, facilite la progression dans l'urètre en cas de saignements ou d'obstruction. Sonde munie d'une ligne radio-opaque, ballonnet 30 ml.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11501363161	3 voies CH 16 40 cm	10
11501363181	3 voies CH 18 40 cm	10
11501363201	3 voies CH 20 40 cm	10
11501363221	3 voies CH 22 40 cm	10
11501363241	3 voies CH 24 40 cm	10

Sonde de foley Préconnectée (latex siliconé)

SECURMED

Système de drainage urinaire préconnecté, composé d'une poche SM4L 2000 ml et d'une sonde de Foley (Nelaton) prête à l'emploi.

La poche inclut un site de prélèvement sans aiguille, une chambre compte-gouttes ventilée avec valve anti-reflux, une tubulure résistante aux pliures et un robinet de vidange anti-goutte. La sonde dispose d'un ballonnet 5-10 ml.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
O100111C22BB	2 voies · poche 2 L CH 14 Tub. 90 cm	50
O100111C22BC	2 voies · poche 2 L CH 16 Tub. 90 cm	10
O100111C22BD	2 voies · poche 2 L CH 18 Tub. 90 cm	10

Sonde de foley Préconnectée (silicone)

SECURMED

Système de drainage urinaire préconnecté, équipé d'une poche SM7 2000 ml et d'une sonde de Foley (Nelaton) 100% silicone, garantissant une excellente tolérance et une réduction des incrustations.

La poche inclut un site de prélèvement sans aiguille, une chambre compte-gouttes ventilée avec valve anti-reflux, une tubulure résistante aux pliures et un robinet de vidange anti-goutte. La sonde dispose d'un ballonnet 5-10 ml.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
O100112E21CA	2 voies · poche 2 L CH 12 Tub. 90 cm	50
O100112E21CB	2 voies · poche 2 L CH 14 Tub. 90 cm	10
O100112E21CC	2 voies · poche 2 L CH 16 Tub. 90 cm	10
O100112E21CD	2 voies · poche 2 L CH 18 Tub. 90 cm	10

Sonde de foley Préconnectée (silicone)

PAHSCO

Système de drainage urinaire préconnecté, composé d'une poche de recueil en forme de goutte et d'une sonde de Foley (Nelaton) en silicone. La sonde offre une bonne tolérance et un ballonnet 5-15 ml pour un maintien sécurisé. Le système comprend un site de prélèvement, une chambre anti-reflux, des orifices d'aération et une tubulure résistante, garantissant un drainage fiable et hygiénique.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
M06059	2 voies · poche 2 L CH 12 Tub. 120 cm	20
M06061	2 voies · poche 2 L CH 14 Tub. 120 cm	20
M06062	2 voies · poche 2 L CH 16 Tub. 120 cm	20
M06063	2 voies · poche 2 L CH 18 Tub. 120 cm	20
M06064	2 voies · poche 2 L CH 18 Tub. 120 cm	20

Poche urinaire avec système Clos (SM4L)

SECURMED

Fabriquée en PVC sans latex et sans DEHP, avec une graduation asymétrique pour une lecture précise.

Équipée Tubulure à large section réduisant le risque d'obstruction, d'une valve antireflux, et d'un robinet de vidange en T permettant une évacuation fluide et hygiénique. La poche inclut un site de prélèvement.

À propos des modèles disponibles :

- 00101106790D : Sans aiguille.
- 001011067901 / 001011067908 : Avec aiguille.



STÉRILE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
00101106790D	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm	100
001011067901	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm	100
001011067908	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm	50

Poche urinaire avec système Clos (SM7)

SECURMED

Fabriquée en PVC sans latex et sans DEHP, avec une graduation asymétrique pour une lecture précise.

Elle intègre une valve antireflux, un robinet de vidange en croix, un site de prélèvement sans aiguille, ainsi qu'une chambre de gouttage avec filtre antibactérien pour optimiser la sécurité et le drainage.



STÉRILE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
004011E17903	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm	20

Poche urinaire avec système Clos (SM4000C)

SECURMED

Idéale pour les patients nécessitant une collecte prolongée. Elle intègre une tubulure à large section pour un écoulement rapide, une valve antireflux, un robinet de vidange à déclic, ainsi qu'un site de prélèvement sans aiguille. Chambre de gouttage avec filtre antibactérien.

Fabriquée en PVC, sans latex et sans DEHP, la poche est équipée d'un crochet et d'un lacet pour une fixation optimale.



STÉRILE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
004011G1A903	Poche 4 litres	Tubulure 90 cm	20

Poche urinaire avec système Clos (SM5000C)

SECURMED

Conçue pour les besoins de drainage prolongé. Elle est équipée d'une tubulure à large section garantissant un écoulement rapide, d'une valve antireflux, d'un robinet de vidange à déclic, d'un site de prélèvement sans aiguille, ainsi que d'une chambre de gouttage avec filtre antibactérien pour renforcer la sécurité du système clos.

Fabriquée en PVC, sans latex et sans DEHP, fournie avec crochet et lacet pour une installation optimale.



STÉRILE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
004011C2B903	Poche 5 litres	Tubulure 90 cm	20

Poche de vidange sans robinet

SECURMED

Se remplace entièrement lorsqu'elle est pleine, sans système de vidange.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001019017903	Poche 2 litres Tubulure 90 cm	50

Poche de vidange avec robinet

SECURMED

Permet le recueil et la vidange des urines grâce à un robinet intégré, sans remplacer la poche.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001019037903	Poche 2 litres Tubulure 90 cm	200

Poche de vidange additionnelle

SECURMED

Utilisée pour transférer les urines d'une poche principale vers un volume de collecte supplémentaire. Elle permet de poursuivre le recueil sans élimination immédiate des urines.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
008019017107	Poche 2 litres Tubulure 10 cm	400

Poche de vidange C3 avec gélifiant SAP

CURAS

Destinée à recueillir les urines avant leur élimination. Le gélifiant SAP solidifie les urines afin de permettre une élimination sûre et hygiénique du contenu.

Équipée du système Flexi-Funnel™ assurant une connexion stable et étanche, ainsi que d'un crochet de suspension Cross-Hanger™.

Graduation lisible pour le contrôle des volumes. Poche à usage unique.

À propos des modèles disponibles :

- 20465 : Pour petits volumes d'urine ou les soins de courte durée.
- 20460 : Pour un usage quotidien en milieu hospitalier.
- 20470 : Sans DEHP pour établissements sensibles



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
20465	Poche 1,5 litres Tub. 90 cm	25
20460	Poche 2 litres Tub. 90 cm	25
20470	Poche 2 litres Tub. 90 cm	25

Gélifiant également disponible séparément dans la section Consommables

Gélifiant SAP

CURAS

Poudre super-absorbante permettant de solidifier rapidement les liquides biologiques, pour une manipulation plus sûre et une élimination sans risque.

Réduit efficacement les déversements, projections et contaminations, offrant une solution hygiénique adaptée aux environnements de soins.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08100	Sachet	100
08101	Bouteille	1

Fosset pour sonde

SECURMED

Bouchon universel en PVC médical, conçu pour assurer l'obturation fiable des sondes urinaires. Sa forme standardisée garantit une compatibilité étendue.

La conception monobloc, stable et homogène, en fait une solution adaptée aux pratiques courantes en établissement de santé.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11201102001	SPIGOT	100

Crochet pour poche urinaire

SECURMED

Conçu pour fixer les poches à urine munies d'une tubulure de 9,0 mm (systèmes clos). Les dents intégrées permettent de percer et maintenir les œilletons situés sur le bord supérieur de la poche, assurant une suspension fiable sur une barrière de lit.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
514SUP05	Plastique bleu	100

Tubulure d'irrigation urologique

BEXEN

Tubulure stérile pour irrigation urologique, équipée d'un perforateur, d'une chambre flexible, d'un régulateur de débit à roulette et d'une extrémité distale en silicone lubrifié assurant une connexion fiable.

Permet l'administration d'une ou deux poches de solution selon les besoins cliniques.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
091.01	Simple	30
091.02	Double	30

Sonde rectale

SECURMED

Sonde rectale 1 voies en PVC médical thermosensible, qui s'assouplit au contact de la température corporelle pour assurer un confort optimal. Son extrémité fermée et arrondie est non traumatique, et ses deux orifices latéraux favorisent un drainage efficace. Transparente pour un contrôle visuel, Idéale pour le drainage rectal court terme.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
11214100401	CH 18	40 cm	100
11214100408	CH 20	40 cm	100
11214100402	CH 22	40 cm	100
11214100409	CH 24	40 cm	70
11214100410	CH 26	40 cm	70
11214100404	CH 28	40 cm	70
11214100405	CH 30	40 cm	70

Kit de lavement flexible

MEDLINE

Kit complet et prêt à l'emploi, comprenant une poche de 1 500 ml équipée d'une valve anti-débordement. Le tube en vinyle souple 150 cm, doté d'un embout pré-lubrifié, lisse et atraumatique, permet une insertion facile et sécurisée. Le kit inclut également un sachet de savon de Castille doux et une alèse imperméable, le tout emballé individuellement.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
DYNDE70100A	1500 ml	48

SETS DE SOINS URINAIRE

Innoset est un assembleur et distributeur de nécessaires de soins stériles depuis plus de 20 ans.

Intégrée au groupe Lavorel Medicare France depuis 2018, dont le siège social est situé à Lyon, Innoset est également reliée à la société Kelis Médical (distributeur de dispositifs médicaux à usage unique).

Située à Escalquens, la société Innoset a récemment développé son activité avec l'ouverture d'un nouveau site de production : Pharmaset.

Ce nouvel espace de 4800 m² est localisé à Sousse (Tunisie) et dispose d'une zone de stockage de plus de 3000 m².




SET DE SONDAGE URINAIRE

RÉFÉRENCE : 516901 UNITÉ PAR CARTON : 30

- 1 Champ patient Ouate 45 x 75cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ patient Ouate 45 x 75 fenêtre 10 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

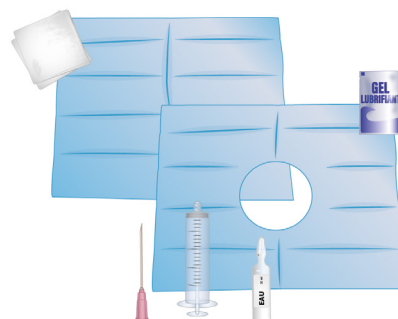

SET DE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE

RÉFÉRENCE : UR-SAD-01 UNITÉ PAR CARTON : 25

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

1 SAC DASRI



NOS CERTIFICATIONS



INNOSET est certifié par l'organisme notifié LNE-GMED

- NF EN ISO 13485
- ISO 11135 - Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène
- Certification règlement 2017/745 EU-MDR selon l'annexe IX – Chapitres I et 3 limité à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

LES SONDES URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

SONDAGE INTERMITTENT


Pose d'une sonde vésicale pour assurer un drainage ponctuel

- Insertion par le méat jusqu'à la vessie
- Unique (chirurgie) ou répété (slérose en plaque, paraplégie...)
- Retiré à la fin de la vidange

2 types de sondage intermittent :

Autosondage par le patient

Hétérosondage réalisé par une tierce personne formée (IDE...)

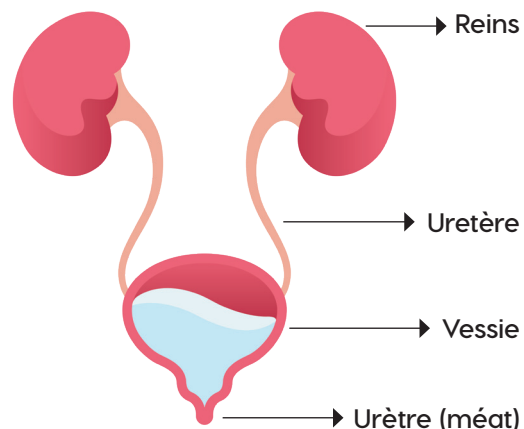

SONDAGE À DEMEURE


Pose de sonde à ballonnet pour assurer un drainage continu

- Aussi appelé **Sonde de Foley**.
- En système clos = sonde + collecteur assemblés
- **Risque infectieux** : à la pose et une fois en place

CHOISIR UNE SONDE ET MIEUX COMPRENDRE VOS BESOINS


Afin de mieux vous accompagner dans le choix de la sonde urinaire à utiliser, nous vous proposons un arbre décisionnel qui vous aidera à clarifier les différentes options disponibles et évaluer vos choix en fonction des critères prédéfinis correspondant à vos besoins.

CHOIX POUR LE SONDAGE URINAIRE

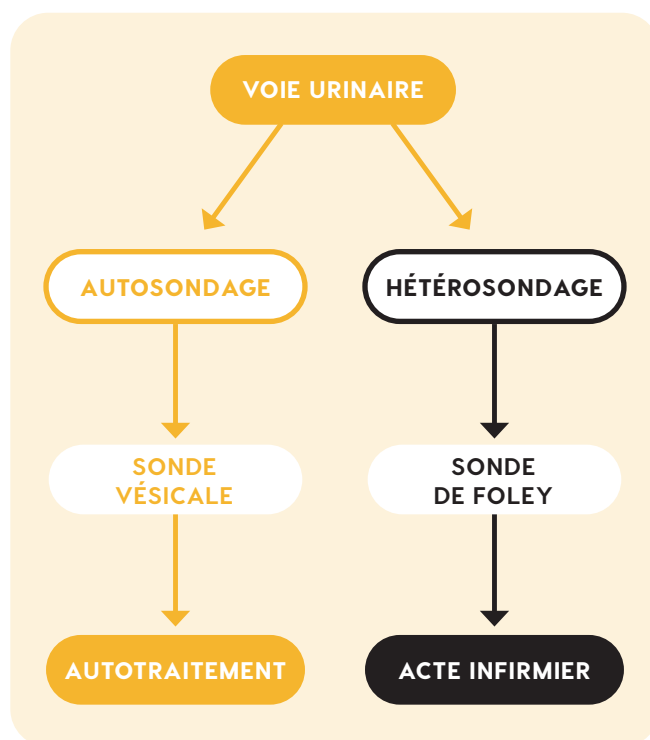


	INTERMITTENTE	À DEMEURRE
MATÉRIAU	PVC (auto)lubrifiant	- Latex siliconé / téflon : 7-15 jours - Latex + hydrogel 100% silicone 4-6 semaines
LONGUEUR	18 - 23 - 38 - 40 cm ♀ ♂	28 - 30 - 40 cm
DIAMÈTRE EXTERNE	CH06 - CH18	CH06 - CH18
ASPECT	Béquillée ou droite - Type Nelaton : droite ♀ ♂ - Type Tiemann : béquillée ♂	
EXTRÉMITÉ DISTALE	Sans ballonnet	Avec ballonnet - Matériau : latex ou silicone - Gonflage : eau stérile (<i>pas sérum phy.</i>) - Volume remplissage : 3-50ml - Avec valve anti-retour (<i>remplissage</i>)
EXTRÉMITÉ PROXIMALE	Godet	
TYPE	Classe I, stérile	

SIMPLE COURANT | DRAINAGE

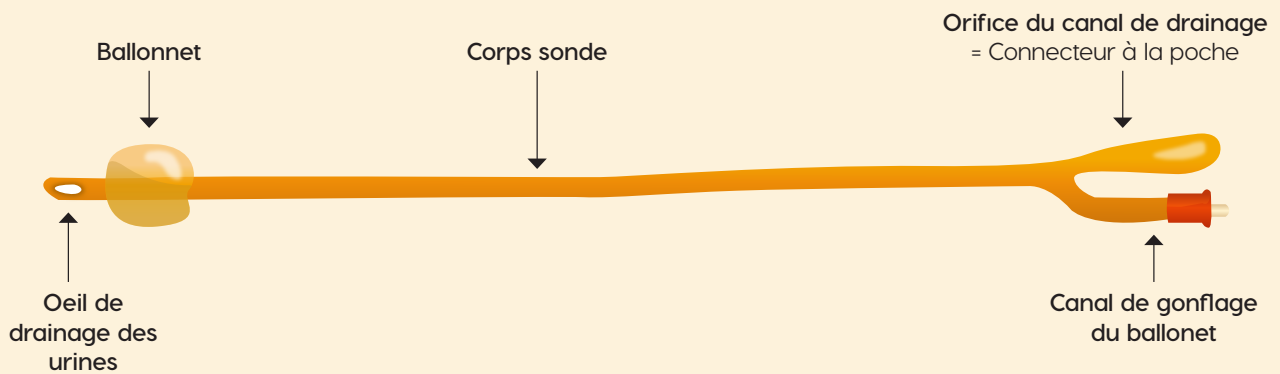

DOUBLE COURANT | IRRIGATION

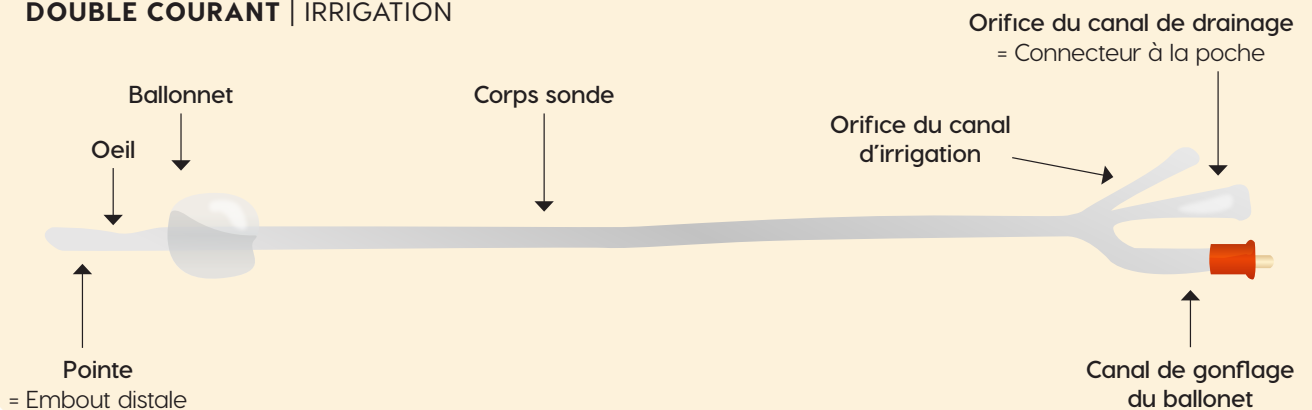

LES POCHE URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

La poche urinaire (ou collecteur d'urine) est destinée à être raccordée à :

- Une sonde urinaire
- Un étui pénien
- Un cathéter sus-pubien
- Une poche de stomie urinaire

Certaines poche urinaires non-stériles peuvent être utilisées en digestif

LES DIFFÉRENTES TYPES DE POCHE


- **Poche stérile intérieur uniquement** (extérieur non stérile) = poche « non stérile »*
- **Poche stérile intérieur et extérieur** = poche « stérile »
- Poche avec / sans site de prélèvement, chambre compte-gouttes, filtre...
- **Urimètre** : spécifique à la surveillance de la diurèse horaire

* La poche de récupération sert à vidanger la poche urinaire en place

LE SYSTÈME LOS

Système clos = aucune déconnexion entre la sonde urinaire et la poche urinaire

- Concerne le **sondage à demeure**
- **Recommandation R76 de la SF2H :**
 - La SAD doit être connectée à un sac collecteur stérile permettant un drainage clos
 - S'assurer que le système ne peut être déconnecté en dehors d'impératifs cliniques (changement de sac selon les recommandations du fabricant...).

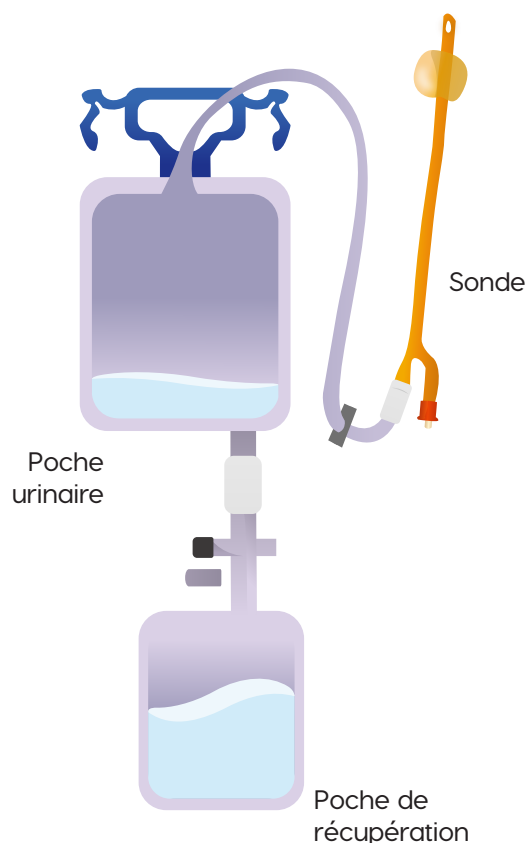

INFORMATIONS TECHNIQUES

La durée maximale d'utilisation varie selon le type de poche et les données fabricant indiquées dans la notice.



1 SEMAINE

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX
+ CHAMBRE COMPTE-GOUTTES

	POCHE NON STÉRILE	POCHE STÉRILE
INDICATION	Intermittent	À demeure
AUTO INDICATION	Etui pénien	-
CONTENANCE	2L	2L - 4L - 5L
SYSTÈME DE VIDANGE	✓ ou ✗ - Robinet push & pull - Robinet en croix	✓ - Robinet push & pull - Robinet en croix - Robinet pince crocodile
VALVE ANTI-REFLUX*	✓ ou ✗	✓
CHAMBRE DE GOUTTAGE	✗	✓
CONDITIONNEMENT	En vrac ou individuellement	Individuellement

RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES

	CARACTÉRISTIQUES		INDICATIONS			
	VALVE ANTI-REFLUX	CHAMBRE DE GOUTTAGE	UTILISATION ÉTUI PÉNIEN	SONDAGE INTERMITTENT	SONDAGE À DEMEURE	
					- 1 SEMAINE	+ 1 SEMAINE
POCHES NON STÉRILES	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✓	✓	✗	✗
POCHES STÉRILES	✓	✗	✗	✗	✓	✗
		✓	✗	✗	✓	✓

DEHP (DI(2-ÉTHYLHEXYL)PHTHALATE)

Plastifiant couramment utilisé pour assouplir les plastiques comme le PVC. Certains dispositifs médicaux sont désormais sans DEHP, car cette substance peut présenter des risques pour la santé en cas d'exposition prolongée, notamment chez les patients fragiles (nouveau-nés, femmes enceintes, etc.).

POCHE URINAIRE

Réservoir souple servant à collecter l'urine drainée par une sonde. Elle peut être utilisée seule (à connecter à une sonde), ou faire partie d'un système préconnecté. Elle est souvent graduée (pour mesurer les volumes) et équipée d'un robinet de vidange.

POCHE DE VIDANGE

Petite poche utilisée temporairement pour vider une autre poche urinaire, notamment en mobilité ou lors de soins. Elle n'est pas connectée en continu à la sonde, mais sert uniquement à recueillir l'urine lors de la vidange.

SONDE DE FOLEY

Tube souple inséré dans la vessie pour drainer l'urine. Elle est équipée d'un ballonnet gonflable à son extrémité, qui la maintient en place une fois insérée. Utilisée pour les sondages de moyenne ou longue durée.

- **Nelaton** : embout droit, standard, pour un sondage urinaire simple - Mixte.
- **Tiemann** : embout coudé, facilite le passage en cas d'obstacle. - Principalement homme.
- **Dufour** : embout large, conçu pour le drainage et le lavage vésical (ex. caillots) - Homme.

SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE

Sonde urinaire avec ballonnet, déjà reliée à une poche de recueil. Elle est prête à l'usage, ce qui facilite la pose et améliore la sécurité du patient. Le ballonnet permet de maintenir la sonde en place dans la vessie.

ROBINET DE VIDANGE EN T

Dispositif en forme de «T» situé en bas de la poche urinaire, permettant de la vider facilement, sans contact avec l'urine. Il est conçu pour être manipulé simplement et en toute sécurité, même avec des gants.

SYSTÈME URINAIRE PRÉCONNECTÉ

Ensemble prêt à l'emploi composé d'une sonde urinaire déjà connectée à une poche de recueil. Cela évite les manipulations supplémentaires, réduit les risques d'erreur ou d'infection, et fait gagner du temps au personnel soignant.

VALVE ANTIREFLUX

Dispositif intégré dans certaines poches à urine qui joue un rôle essentiel pour la sécurité et le confort du patient. Elle empêche le retour de l'urine ou des gaz depuis la poche vers la sonde urinaire ou la vessie. Cela signifie que :

- ✓ L'urine ne peut circuler que dans un seul sens : de la vessie vers la poche.
- ✗ Elle évite les infections urinaires en empêchant les bactéries de remonter.
- 👉 Elle bloque aussi les gaz qui pourraient causer des gênes ou des douleurs.

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE
75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA
840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

 serviceclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00

**Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h**



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon