

POCHE URINE NON VIDANGEABLE

Caractéristiques Techniques

Corps de la poche:	réalisé en PVC atoxique, souple et résistant SANS LATEX et SANS DEHP
Couleur de la poche:	transparent ou blanche opaque et transparent
Tubulure de la poche:	réalisée en PVC atoxique, transparent, la haute qualité du granule de PVC utilisé confère l'effet «mémoire» à la tubulure face aux pliages éventuels. Le longueur de la tubulure peut être adapté aux exigences du client (entre 90 et 150 cm).
Raccord:	universel, blanche en PVC atoxique
Valve de non-retour:	néant
Robinet de vidange:	néant
Soudure:	double, résistance excellente
Points d'attache:	4, renforcés pour permettre une fixation stable, par un dispositif adéquat, au lit et des manipulations et transfèrements sûres de la poche.
Graduation:	asymétrique pour permettre une correcte lecture du liquide contenu
Capacité de la poche:	2 l.
Stérilisation:	sur demande, réalisée par un mélange de ETO + CO2
Marque de commerce:	Securdrain Vià!

Informations pour l'utilisation

MODE D'EMPLOI

Utilisation

1. Ouvrez l'emballage et retirez la poche à urine de l'emballage
2. Inspectez et ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert / endommagé ou si le dispositif est défectueux
3. Accrochez la poche à urine au pied du lit, fixer verticalement le système de recueil et positionner le tube de connexion pour permettre un écoulement facile
4. Fixez le tube de connexion avec une pince
5. Connecter le connecteur de l'entonnoir d'évacuation de la sonde

Changement d'une poche à urine

- Utiliser les gants pour le vidange
- Retirer la poche utilisée
- Effacer le raccord de la sonde urinaire
- Connecter une autre poche au raccord de la sonde

Écoulement

Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales sur les déchets médicaux contaminés.


Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec à température ambiante comprises entre +10 ° C et +35 ° C.

Le produit doit être protégé de la chaleur et de la lumière solaire directe. L'entreposage doit éviter les températures élevées, une forte humidité, sans gaz érosive et avec une bonne aération

La stérilité est assurée pendant 5 ans, sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Dessin Technique

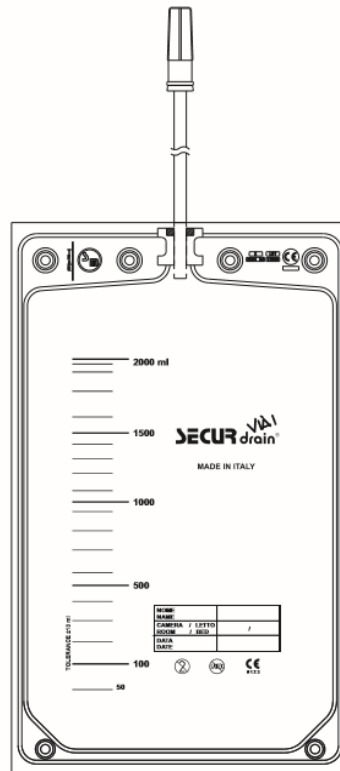

Codifications et emballage

<u>CODE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>EMBALLAGE</u>
001019017900	POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, PAS STERILE	CARTON DE 250 PCS. DIMENSIONS : 39 * 29 * 34 CM
001019017903	POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, PAS STERILE	CARTON DE 200 PCS. DIMENSIONS : 39 * 29 * 34 CM

Etiquetage (exemple)

CARTON




 SECURMED S.p.A.
 VIA MONTE GRAPPA, 2/G
 36016 THIENE (VI) - ITALY
securdrain *Viati*
 I - SACCA URINA : STANDARD
 GB - URINE BAG : STANDARD
 F - POCHE A URINE : STANDARD
 P - SACO DE URINA : STANDARD
 N - URINE ZAK : STANDARD
 Tubo / Tube / Tubulure / Tubo / Tube 90 cm
 Volume 2000 ml
 Q.tà / Q.ty / Q.té / Q.de / Bedragen 250
 LOT 19F02
 2022 - 05 2017 - 06
 REF 001019017900
 8 025500 001052
 I - NON ESPORRE A TEMPERATURE ESTREME E/O ECCESSIVA UMIDITA'. NON CONTIENE LATTICE.
 GB - DO NOT EXPOSE TO EXTREME TEMPERATURES AND/OR HUMIDITY. LATEX FREE.
 F - NE PAS EXPOSER A TEMPERATURES E/OU HUMIDITE EXTREMES SANS LATEX.
 P - NAO EXPOR A TEMPERATURAS EXTREMAS E/OU ECCESSIVA HUMIDADE. ISENTO DE LATEX.
 N - NIET BLOOTSTELLEN AAN EXTREME TEMPERATUUR EN/OF VOCHTIGHEID. GEEN LATEX.


Explications des Symboles Graphiques



Sans DEHP



Garder au sec



Pas Sterile



Tenir à l'écart de la lumière

du soleil



Recyclage



Code de Lot



Usage Unique



Date de Péréption



Fabriquant